

Vítejte v sérii videí k diagnostické metodě o variabilitě srdečního rytmu a zařízení Varicard.





Začínáme v okamžiku, kdy máte nainstalovaný software pro zařízení Varicard do počítače. Máte na ploše Vaší obrazovky dvě ikony. Nyní se naučíme, jak zařízení ovládat.




První krok. Ikony.

Zapněte si počítač a připojte zařízení Varicard. Černý kabel vsuňte do USB portu ve Vašem počítači. Na ploše Vašeho počítače najdete ikonu ISCIM. Na obrázku je postava člověka v zeleném kruhu. Dvojklikem ji označte.




Druhý krok. Elektrody.

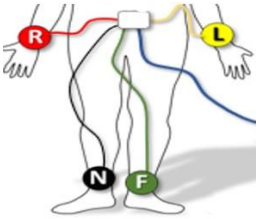


Klient sedí v klidu proti Vám. Černou elektrodu má na pravé noze nad kotníkem, zelenou elektrodu na levé noze, červenou elektrodu na pravé ruce u zápěstí a žlutou elektrodu na levé ruce. Všechny elektrody jsou v kontaktu s kůží a měly by být navlhčené, aby přenos signálu byl lepší.

Třetí krok. Řeč.

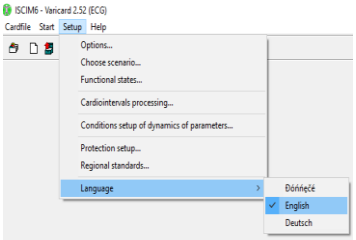


Můžete si vybrat komunikační jazyk programu. Změnu jazyka můžete udělat kdykoli. Ovládání programu je v němčině, angličtině a španělštině. Závěrečné výsledky jsou ještě v dalších 10 jazycích. V tomto okamžiku používám angličtinu.

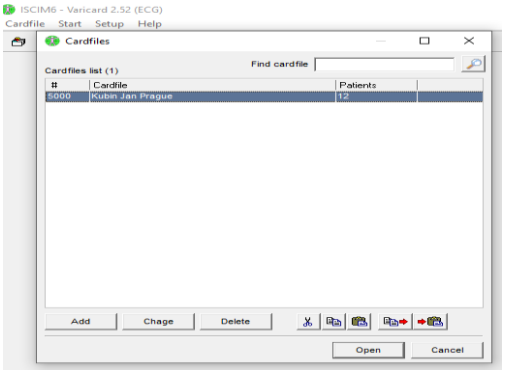


Čtvrtý krok. Databáze.

Toto je ikona pro databázi klientů. Ikona „card file manager“ Vám umožní přidat, přejmenovat či smazat databázi. Můžete například použít samostatné databáze pro jednotlivé doktory, pro různá města a podobně. Zde vidíte všechny 3 ikony.

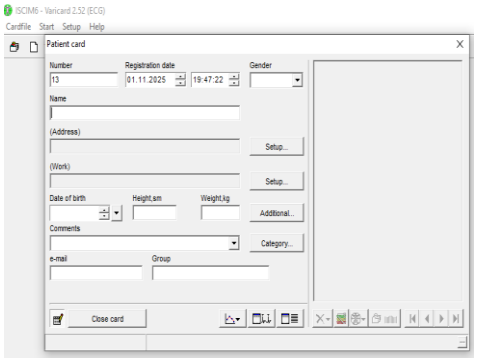


Pátý krok. Práce s klientem.

Když je klient u Vás poprvé, musíte mu založit jeho kartu. Je důležité vyplnit alespoň následující základní pole. Pohlaví, protože příroda nás vyrobila rozdílně. Vyplňujete muž nebo žena. Vše se zapisuje bez diakritiky. Následně vyplňte datum narození, výšku a váhu. Při instalaci jsme si zvolili správné jednotky míry ve Vaší zemi.

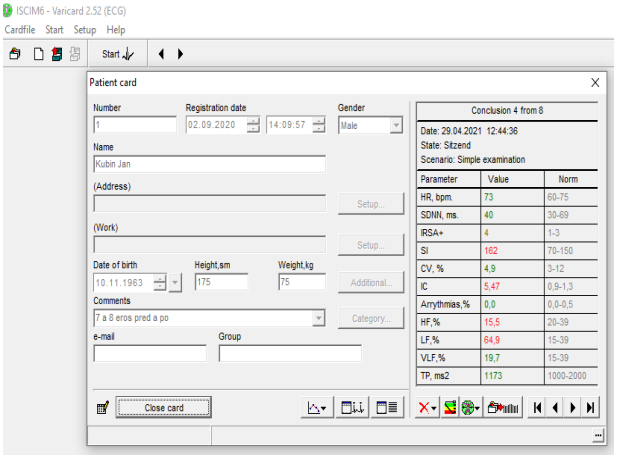


Šestý krok. Start samotného měření.

Klient sedí v klidu s elektrodami před Vámi. Doporučuji, aby klient neviděl na obrazovku a aby nehýbal rukama a ani nohama po dobu měření. Nejčastěji využívám 5 minut. Důvodem je zabránění vzniku technických chyb při načítání signálu. Mačkáme ikonu START. Na obrazovce se rozběhne EKG záznam.

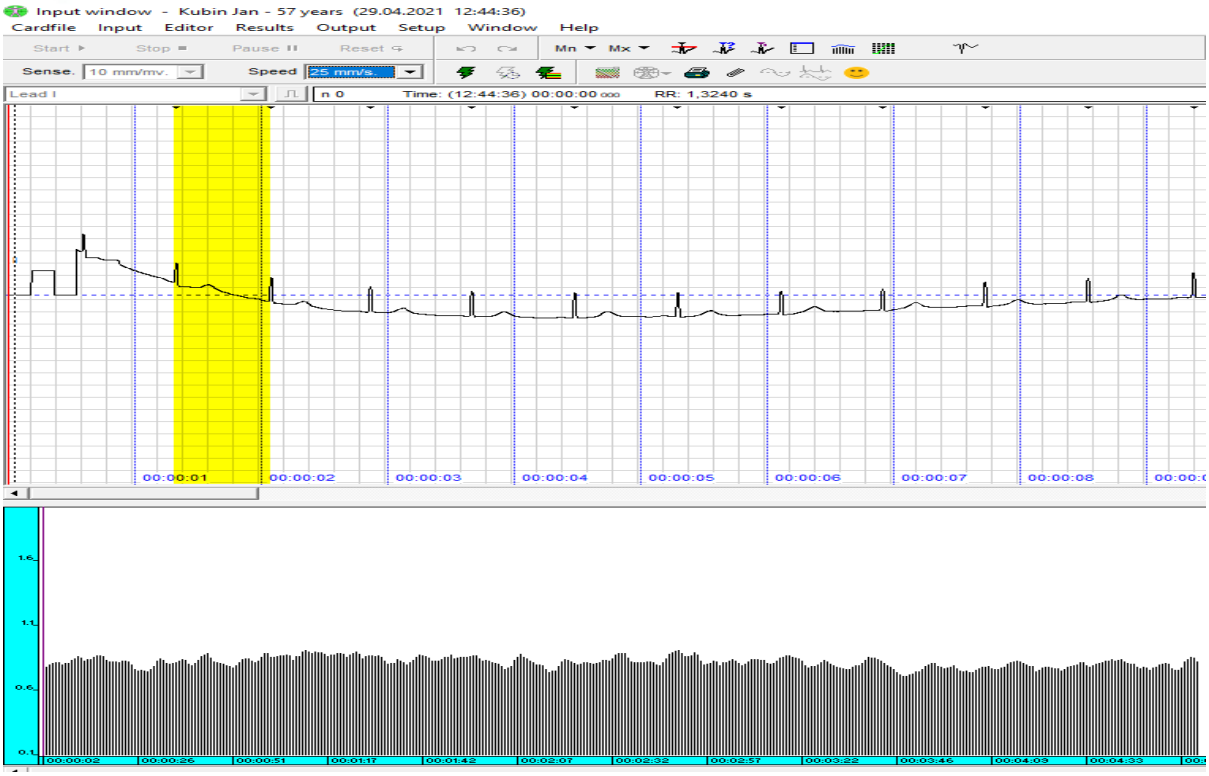


Sedmý krok. Načítání EKG signálu.

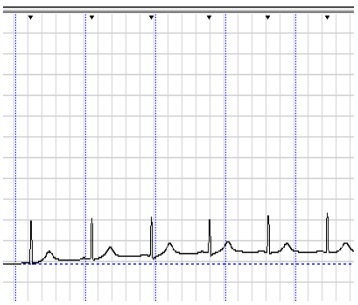


Vidíme ubíhající křivku. Nad každým R-pick by měl být umístěn malý černý trojúhelník. Program měří v milisekundách časové rozdíly mezi R-picky. Právě tyto rozdíly jsou základem pro výpočet parametrů variability srdečního rytmu resp. výpočtu stavu komunikace nervového a hormonálního systému. Pokud označení chybí, jde o technickou chybu, kterou je potřeba opravit.

Osmý krok. Správný výběr svodu.

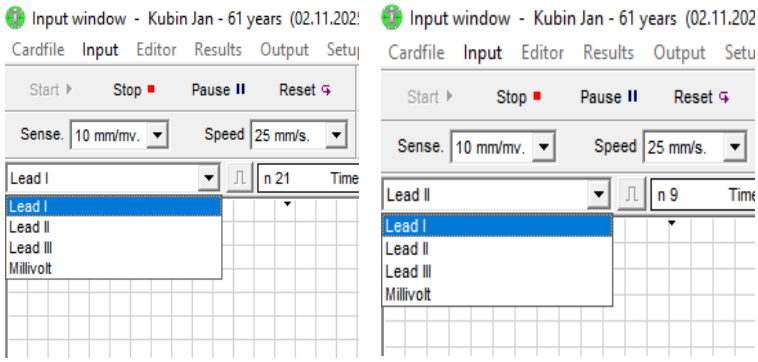


Na začátku každého měření je potřeba vybrat nejlepší svod před zpracováním signálu. To můžeme udělat takto. Na tohoto políčku je trojúhelníček. Můžete na něj kliknout a vybrat Vámi vybraný svod I, II nebo další. Vybíráme svod s nejvyššími R-picky.

Devátý. Krok. Kontrola R-picků

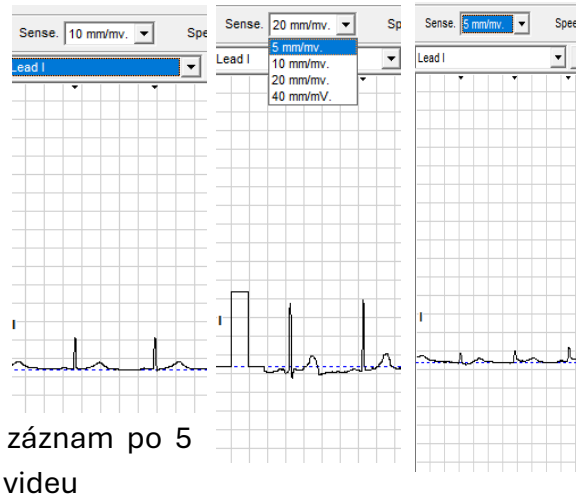

Můžete kliknout na pole senzitivity a zvýšit či snížit velikost R-picku. Jakmile máte vybráno, necháte signál načítat celých 5 minut a sledujte záznam celou dobu. Na klienta, pokud možno nemluvte. EKG signál nám může poskytnout mnoho dalších informací. O tom se zmíníme později. Nyní vidíme, že se záznam po 5 minutách zastavil. Pokračování najde v dalším videu

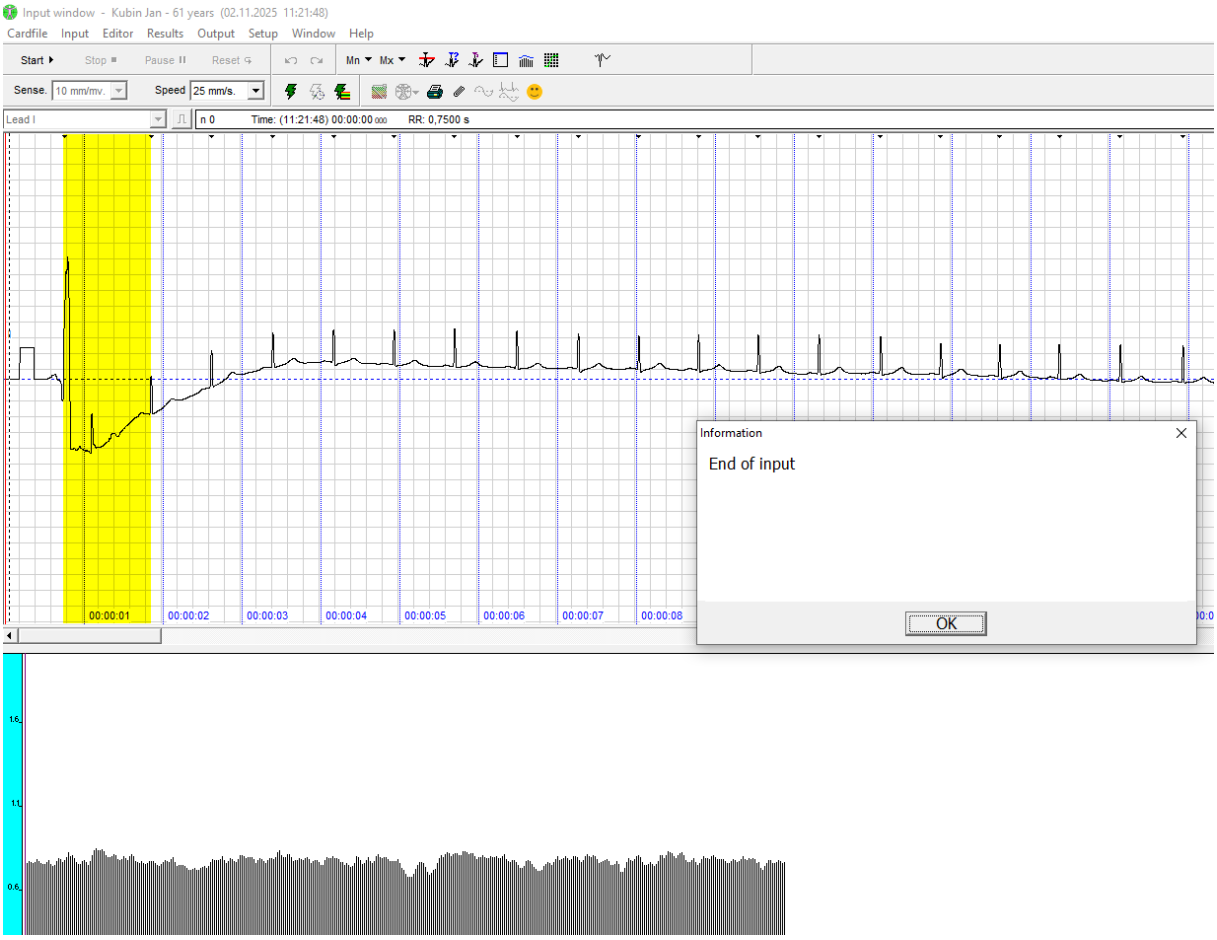

Kontakty: Jan Michael Kubín

Adresa: Gercenova 856/3, Praha 15, 102 00

Phone: 00420 – 602 344 013

E-mail: jan.kubin@hrv-healthcontrol.com



kubin.pansofia@gmail.com

WEB: www. hrv-healthcontrol.com

Níže uvedené weby budou spuštěny 2026 až 2027:

www.vitalityflows.com

www.vitalityflows.eu

www.doctorathome.cz

www.expresshealth.eu